

Chiller



MODEL	HD-02A	COMP	1.5	Kw	
COOLING CAP.	5,600	Kcal/hr	PUMP	0.76	Kw
POWER	1PH 220V 60	Hz	FAN	0.12	Kw
REFRIGERANT	R 22	WEIGHT			Kg
SIZE(L*W*H)	500*700*1000	DATE	2012.8		

압축기용량	순환펌프용량	최대순환량	탱크용량	냉각능력	전원	총소비전력	외형지수
kW(HP)	kW(HP)	ℓ/min	ℓ	kal/hr	V	kW/h	L(mm) W(mm) H(mm)
HD-02A	1.5(2)	0.69(0.92)	20~24	39	5600~6000	2.33	800 700 1000


Cable 작업을 위해 현재 Chiller를 한 번 종료 해야 함.

Trap Coil

Coil for 67 Gauss

- $B = \mu_0 n I$
- Let current 6A (available smps at SNU)
- $\therefore n = \frac{B}{\mu_0 I} = \frac{67 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7} \times 6} = 8.9 \times 10^2 (m^{-1})$
- 1m 당 890번 감아야 한다. MRE의 trap length 가 150 mm정도이므로 50 cm의 코일을 만드려면 445번 감아주면 된다.

20cm 기준으로 178번 -> $45\text{mm} \times 2 \times \pi \times 178 = \text{약 } 52\text{m}$

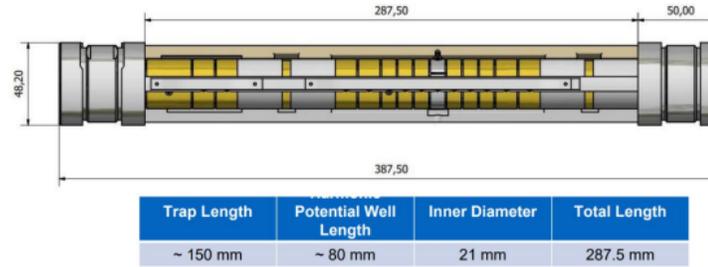

에나멜선 0.2~1.0mm 1kg 에나멜등선 과학실험재
23,000원


택배	2,500원 (100,000원 이상 주문시 무료) <input type="checkbox"/> 무료배송 구분보기 <input type="checkbox"/>
우수회원	최대 1.5% 적립*
원산지	한국
해택	무이자 할부 <input type="checkbox"/>

배송비 결제
주문시 2,500원 결제

옵션선택
규격선택


함께 구매 가능한 추가 상품 더보기
선택 독립사에게 최저가를 물어보세요~
최대 3만원까지
추가할인 쿠폰이 발급됩니다.

CCD Camera

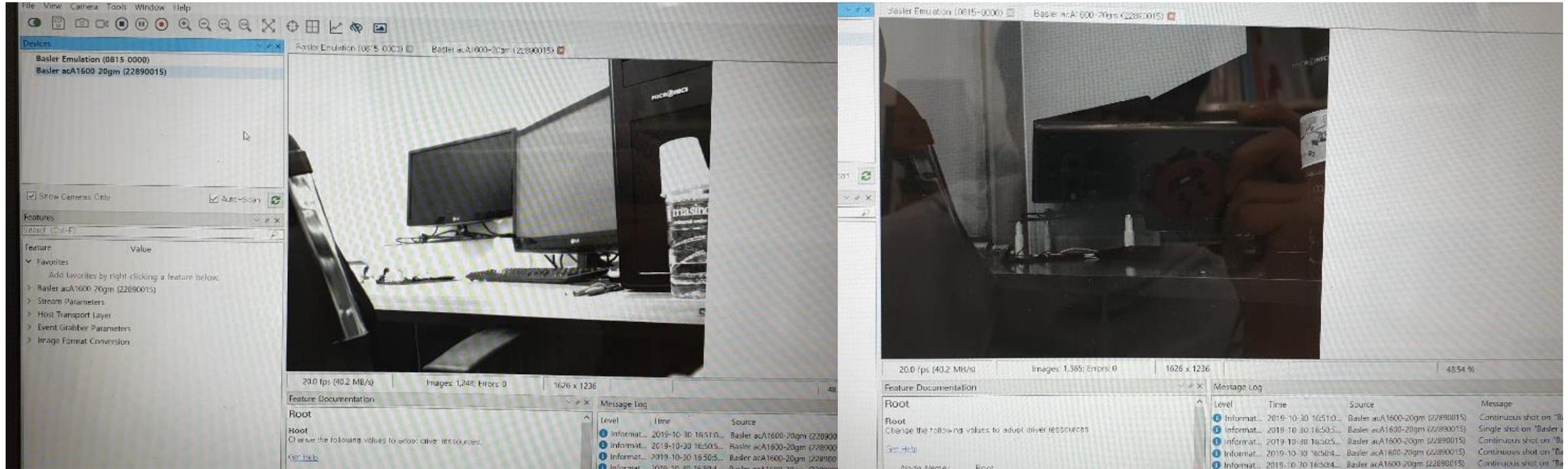


CCD Camera Test
-> 초점 / 조리개 이상 없음
-> 사용시 공유기 필요함(GIGE 통신)

MCP Mount

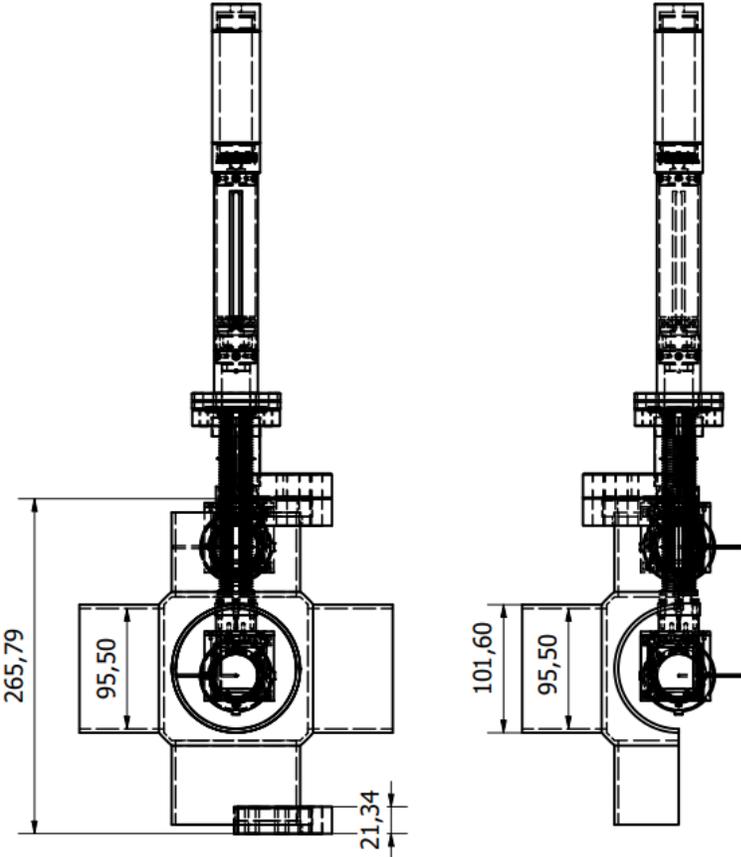

MCP + 6way cross

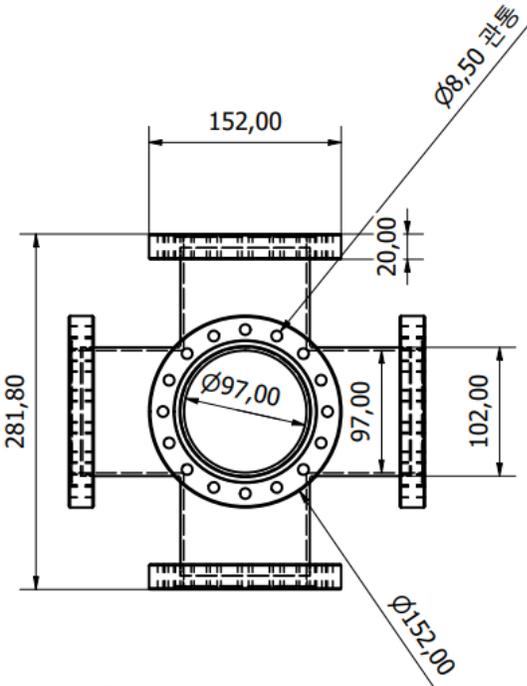

6inch 6way cross

